

# PHILOS


Proximal Humeral Internal Locking System



PHILOSは、主に高齢者に見られる不安定な上腕骨近位部骨折への治療を目的に開発されたロッキングプレートシステムです。

適応：

- 関節外単極骨折
  - 関節内骨折
  - 関節外双極骨折
  - 骨幹部骨折
- AO分類11-A1を除く

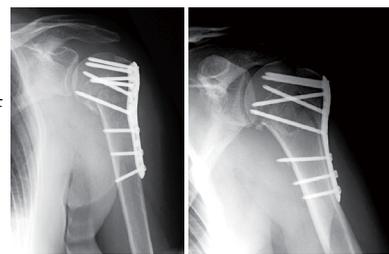

### FEATURE 01 | Locking System

#### ロッキングシステム

- 上腕骨頭内に最大9本のロッキングスクリューが挿入可能です。
- 整復位を安定保持し、術後の内反転位のリスクを低減します。


### FEATURE 02 | Anatomic design

#### ベンディング不要のアナトミカル形状

- 厚さ2.5mmのロープロファイル形状
- スーチャーホールを使用し、棘上筋や肩甲下筋の腱と縫合することで大結節及び小結節骨片などの安定した内固定も可能です。

スーチャーホール使用例：

アプローチ例：

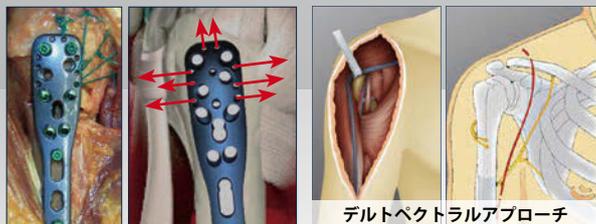


デルトヘクトラルアプローチ

### FEATURE 03 | Versatile adaptability

#### スプーン部の多彩なロッキングスクリュー角度

- 粉碎した多骨片骨折や粗鬆骨への適応も可能です。

- 最近位15° 上方
- 40° のクロス
- 30° の広角
- コンビネーションホール
- 10° の広角
- ポジショニングホール

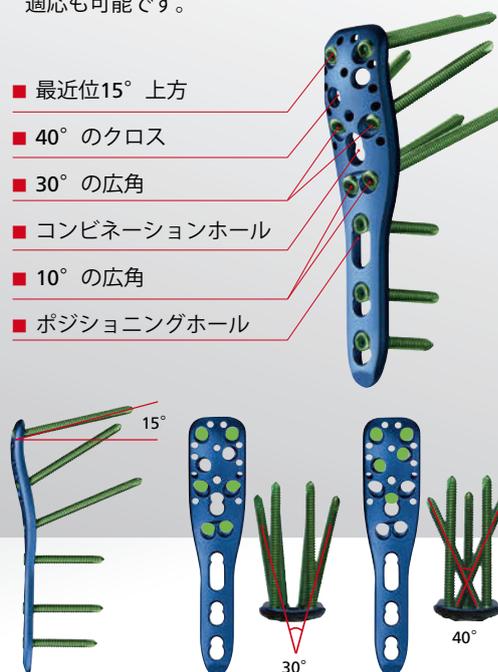

#### IMPLANTS

##### PHILOS

カタログ番号	シャフト部穴数	全長(mm)
441-9015	3	90
441-9035	5	114

厚さ：2.5mm / シャフト幅：12.0mm / 適合スクリュー：3.5/4.0mm

##### PHILOS ロング

カタログ番号	シャフト部穴数	全長(mm)
441-9185	5	142
441-9195	6	160
441-9205	7	178
441-9225	9	214
441-9235	10	232
441-9245	11	250

#### INSTRUMENTS

##### PHILOS 器械セット

カタログ番号	製品名
323-050	ガイディングブロック
323-053	センタリングスリーブ
323-054	ドリルスリーブ
323-055	K-ワイヤースリーブ 1.6mm

※ 別途LCPスモールフラグメント手術器械セットが必要です。



COMPANIES OF Johnson & Johnson



使用に際しては患者の状態および総合的な条件を考慮した上で治療材料および手技を選択し、当該製品の資料や手技書の関連文書、添付文書を必ず読み記載の指示に従ってください。

製造販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  
デピューシンセス事業本部  
トラウマ & ジョイントリコンストラクション事業部  
〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号  
depuyssynthes.jp

□ トラウマ & CMF受注センター  
T. 0120 785 645 / F. 0570 060 020  
受注受付時間 ○ 平 日 / 08:00~21:00  
○ 土・日・祝日 / 10:00~19:00  
□ カスタマーサービスセンター  
T. 0120 552 335  
受注受付時間 ○ 平 日 のみ / 09:00~17:00

販売名：AO ロッキング コンプレッション プレート システム (滅菌)  
承認番号：21300BZY00483000  
販売名：AO LISS ロッキング プレート システム インプラント (滅菌)  
承認番号：21600BZY00682000  
販売名：LCP スモール手術器械セット  
届出番号：13B1X002045TP003